



ixx2[®]

Implantatsystem / Implant System


Made in Germany

 **servo-dental**[®]

Über uns / *About us*

Servo-Dental / <i>Servo-Dental</i>	2
------------------------------------	---

Chirurgie / *Surgery*

Design / <i>Design</i>	4
Eigenschaften / <i>General Features</i>	5
Durchmesser und Längen / <i>Diameters und Lengths</i>	7
OP-Tray / <i>Surgical Tray</i>	8
Bohrprotokoll / <i>Drill Protocol</i>	10

Prothetik / *Prosthetics*

Gingivaformer und Abdruckhilfsteile / <i>Gingiva Shapers and Impression Parts</i>	12
Abformtechniken / <i>Impression Techniques</i>	13
Aufbauten für festsitzenden Zahnersatz / <i>Abutments for Fixed Dentures</i>	14
Digitale Lösungen / <i>Digital Solutions</i>	19
Aufbauten für herausnehmbaren Zahnersatz / <i>Abutments for Removable Dentures</i>	20
Werkzeuge / <i>Tools</i>	23

Servo-Dental



Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt das Hager Unternehmen Servo-Dental hochwertige Dentalimplantate und prothetische Komponenten. Sowohl national als auch international wird Servo-Dental für höchste Produktqualität sowie exzellente technische Beratung geschätzt.

For more than 40 years, Servo-Dental from Hagen, Germany, has been developing and manufacturing top quality dental implants and prosthetic components for the dental practice and laboratory. On national as well as international scope, Servo-Dental is appreciated for its highest product quality and excellent technical support.



Hersteller / Manufacturer

Servo-Dental GmbH & Co. KG
Rohrstr. 30
58093 Hagen
Germany



Fon +49 (0) 23 31 / 95 91 - 0
Fax +49 (0) 23 31 / 95 91 - 25
info@servo-dental.de
www.servo-dental.de











CHIRURGIE SURGERY

ixx2[®]

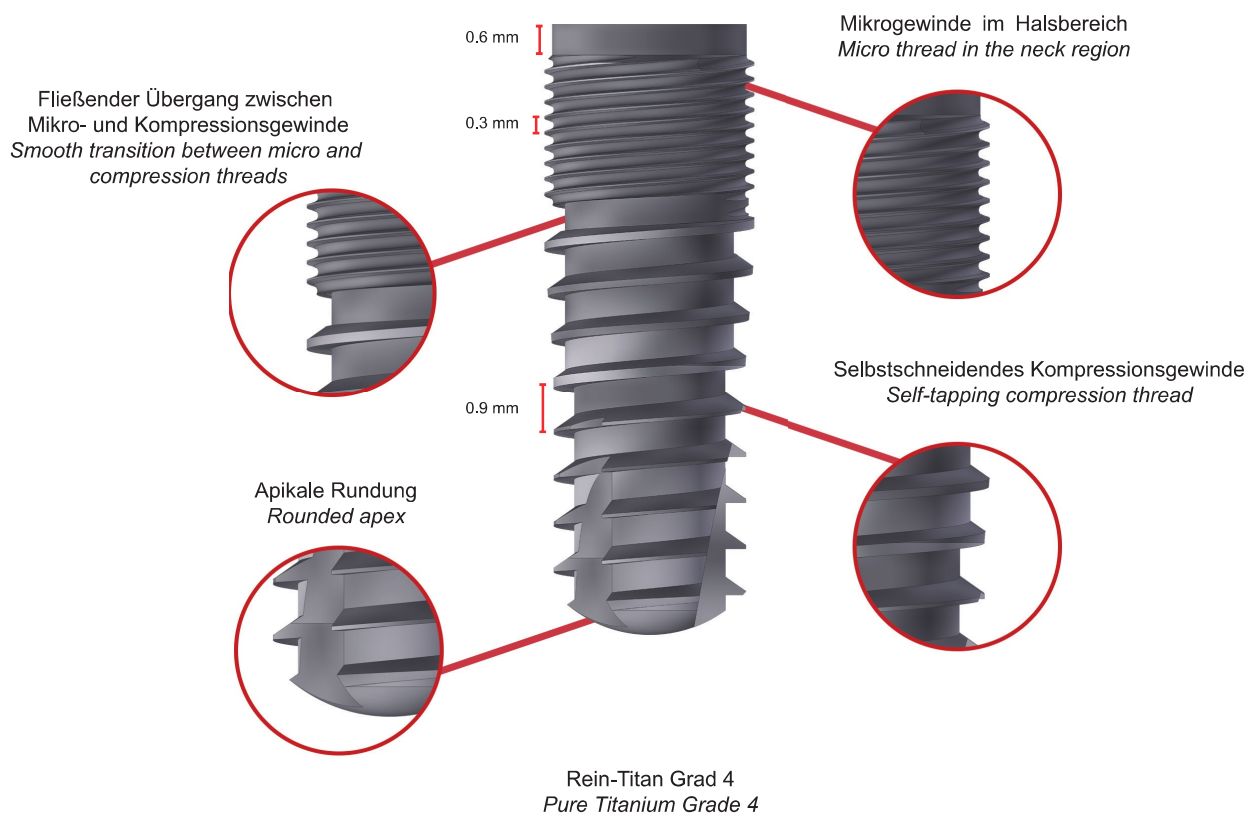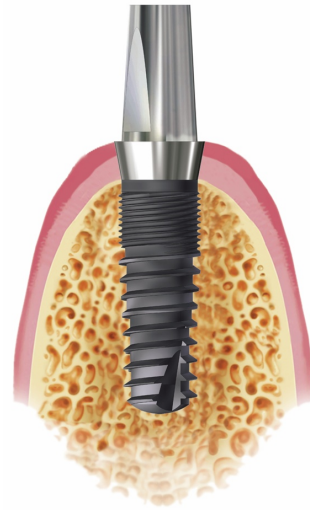

- Zylindrisch-konische Form (Hybrid-Design).
- Gestrahlte, grobkörnige, säuregeätzte Implantatoberfläche.
- Hergestellt aus biokompatiblen Rein-Titan Grad 4 nach ISO 5832-2 / ASTM F76.
- Gute Primärstabilität und gleichmäßige Kraftverteilung im Knochen durch Mikrogewinde im Halsbereich.
- Sicheres Erreichen der notwendigen Primärstabilität durch selbstschneidendes Kompressionsgewinde.
- Verkürzte Einbringzeit dank ausgeprägter Gewindeflanken und -Steigung.
- Keine Beeinträchtigung des Weichgewebes und der anatomischen Strukturen bei der Insertion durch apikale Rundung.
- Apikale Schnittkerben bieten zusätzliche Rotationssicherung.
- Konusverbindung für form- und kraftschlüssige Verbindung.
- Tube-in-Tube-Design mit präzisiertem Formschluss garantiert Stabilität und Dichtigkeit.
- Verpackungsdesign ermöglicht direkte Entnahme des Implantats zur manuellen oder maschinellen Insertion.
- Empfohlene Einheilzeit:
12 Wochen für Unterkiefer und 20 Wochen für Oberkiefer.


- Cylindrical-conical outer shape (Hybrid Design).
- Blasted, large grit, acid-etched implant surface.
- Made from biocompatible pure titanium grade 4 according ISO 5832-2 / ASTM F76.
- Good primary stability and even force distribution in the bone provided by micro-thread in the neck area.
- Reliable achievement of the necessary primary stability due to self-tapping compression thread.
- Shorter insertion time thanks to progressive thread flanks and thread pitch.
- No harm to the soft tissue and anatomical structures during insertion due to rounded apex.
- Apical notches provide additional rotation protection.
- Cone connection for form-fit and force-fit connection.
- Tube-in-tube design with precise form fit guarantees stability and tightness.
- Packaging design enables direct removal of the implant for manual or mechanical insertion.
- Recommended healing time:
12 weeks for lower jaw and 20 weeks for upper jaw.

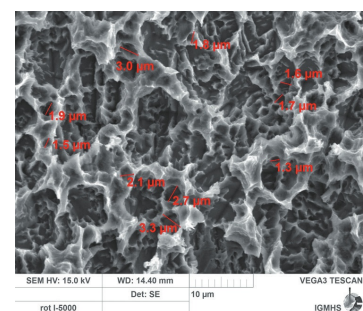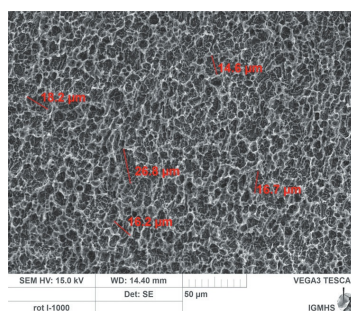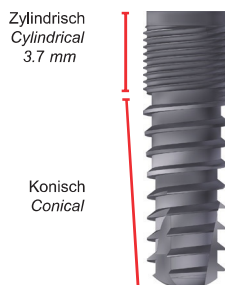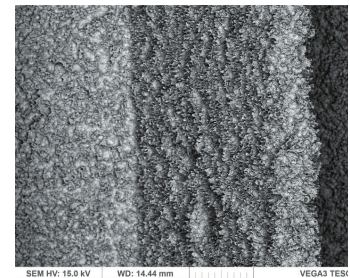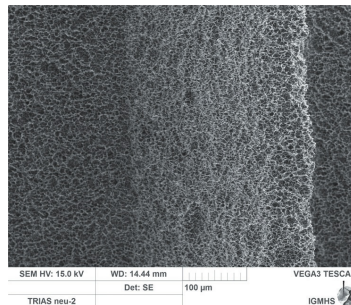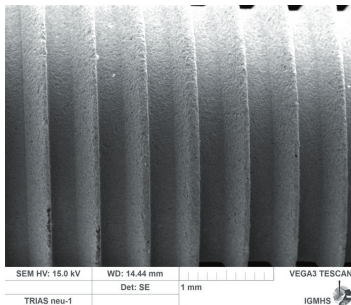

Innenverbindung Internal Connection

- Gleiche Innenverbindung bei allen Implantatdurchmessern ermöglicht Nutzung durchmesserreduzierter Aufbauten.
- Nur eine Zentral- und Arbeitsschraube für alle Aufbauten (Ausnahme: Stegaufbauten).
- Leichtes geführtes Platzieren des Aufbaus im Implantat durch Tube-in-Tube-Design.
- Achtkantverbindung ermöglicht variable Positionierung speziell bei angulierten Aufbauten.

- *The same internal connection for all implant diameters enables the use of abutments with reduced diameters.*
- *Only one central and working screw for all abutments (exception: bar abutments).*
- *Easy guided placement of the abutment in the implant due to tube-in-tube design.*
- *Octagonal connection enables variable positioning especially with angled abutments.*

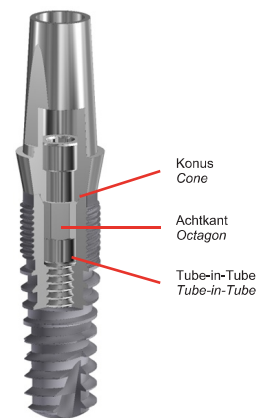

Farbcodierung Color Coding



Die chirurgischen und prothetischen Komponenten sind farbcodiert, was eine einfache, schnelle und zuverlässige Anwendung ermöglicht.
The surgical and prosthetic components are color-coded for easy, fast and reliable application.

Lieferumfang Scope of Delivery



Sterile Verpackung
Sterile Package



Steriles
Kunststoffröhrchen
Sterile Plastic Tube



Implantat
-träger
Inner Vial



Implantat
Implant



Kunststoffdeckel
mit Einheitschraube
Plastic Top
with Healing Screw



Einheit-
schraube
Healing
Screw




Patienten-
etiketten
Patient
Labels




Gebrauchs-
anweisung
Instructions for use

Implantat / *Implant* Ø 3.3 mm

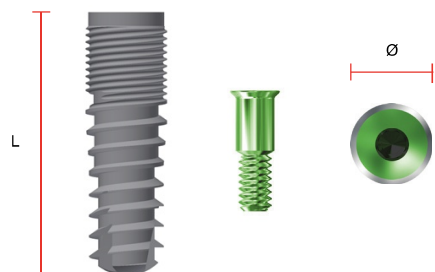


Ø	Länge Lengths	Plattform Platform Ø	Verbindung Connection	Artikel-Nr Item-No
3.3 mm	10 mm	3.3 mm	2.3 mm Innenachtkant 2.3 mm Internal Octagon	33010tx
3.3 mm	12 mm			33012tx
3.3 mm	14 mm			33014tx
3.3 mm	16 mm			33016tx

Implantat / *Implant* Ø 3.8 mm

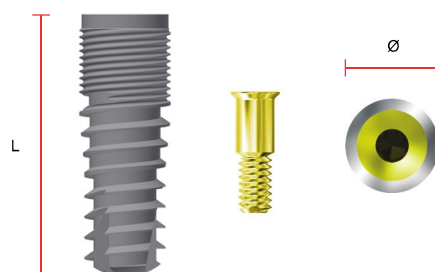


Ø	Länge Lengths	Plattform Platform Ø	Verbindung Connection	Artikel-Nr Item-No
3.8 mm	8 mm	3.8 mm	2.3 mm Innenachtkant 2.3 mm Internal Octagon	38008tx
3.8 mm	10 mm			38010tx
3.8 mm	12 mm			38012tx
3.8 mm	14 mm			38014tx
3.8 mm	16 mm			38016tx

Implantat / *Implant* Ø 4.4 mm

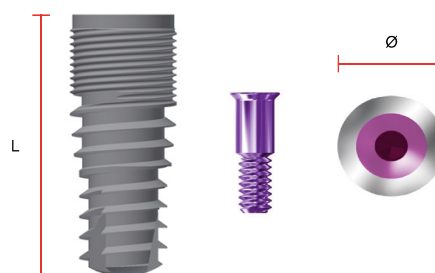


Ø	Länge Lengths	Plattform Platform Ø	Verbindung Connection	Artikel-Nr Item-No
4.4 mm	8 mm	4.4 mm	2.3 mm Innenachtkant 2.3 mm Internal Octagon	40008tx
4.4 mm	10 mm			40010tx
4.4 mm	12 mm			40012tx
4.4 mm	14 mm			40014tx
4.4 mm	16 mm			40016tx

Implantat / *Implant* Ø 5.0 mm

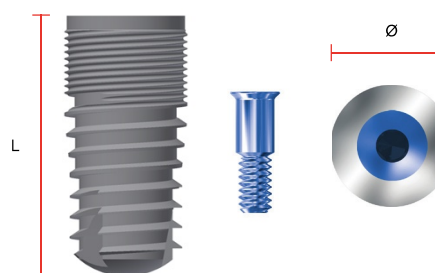


Ø	Länge Lengths	Plattform Platform Ø	Verbindung Connection	Artikel-Nr Item-No
5.0 mm	8 mm	5.0 mm	2.3 mm Innenachtkant 2.3 mm Internal Octagon	50008tx
5.0 mm	10 mm			50010tx
5.0 mm	12 mm			50012tx
5.0 mm	14 mm			50014tx



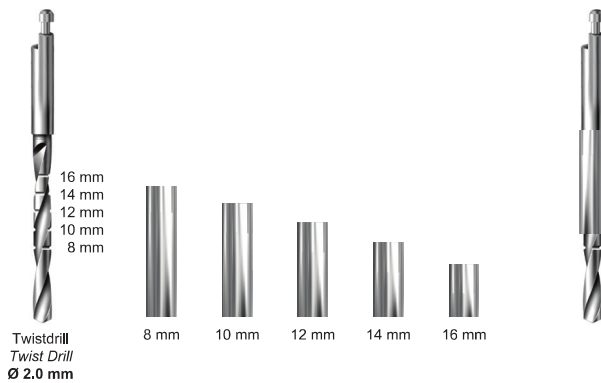

- Das OP-Tray enthält Pilotbohrerstops für den Twistdrill (Pilotbohrung).
- The surgical tray contains drill stops for the twist drill (Pilot Drilling).

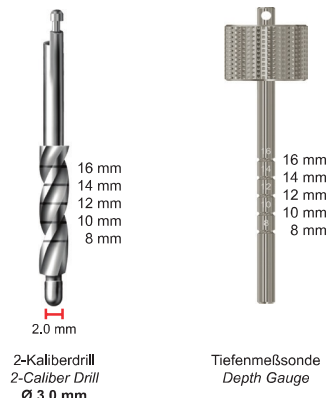

- Die im OP-Tray enthaltenen Finaldrills ermöglichen durch ihre Gewindestruktur das Sammeln von autologem Knochen.
- The threaded structure of the final drills contained in the surgical tray allows autologous bone to be collected.



- Das OP-Tray enthält Gewindeschneider für alle Implantatdurchmesser zur Vorbereitung des Implantatbetts bei dichtem Knochen.
- The surgical tray contains reamers for all implant diameters for preparing the implant bed in dense bone.



Parallelindikator für Pilotbohrung
Paralleling Pin for Pilot Drilling



- Die im OP-Tray enthaltenen Parallelindikatoren bieten eine einfache Möglichkeit, die Implantatrichtung nach der Pilotbohrung mit dem Twistdrill zu prüfen.
- The paralleling pins contained in the surgical tray provide an easy way to check the implant direction after pilot drilling with the twist drill.




- Das OP-Tray enthält Werkzeuge für die manuelle und maschinelle Handhabung.
- The surgical tray contains tools for manual and contra-angle handling.




- Das OP-Tray enthält eine Drehmomentratsche, die von 10-45 Ncm stufenlos einstellbar ist.
- The surgical tray contains a torque ratchet that is infinitely adjustable from 10-45 Ncm.


Für Implantat / For Implant Ø 3.3 mm

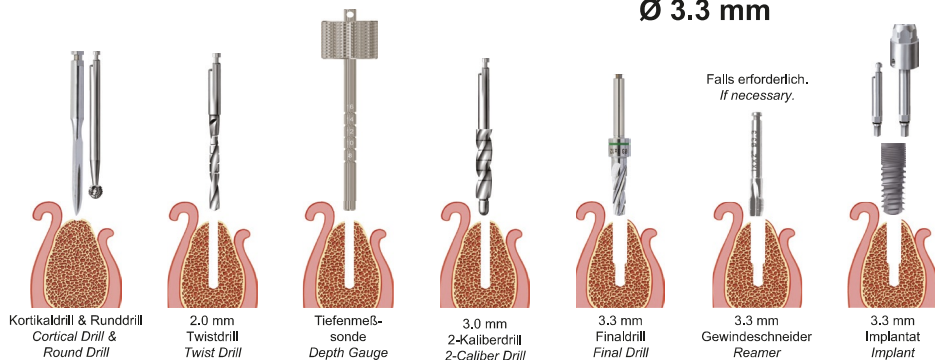


Für Implantat / For Implant Ø 3.8 mm

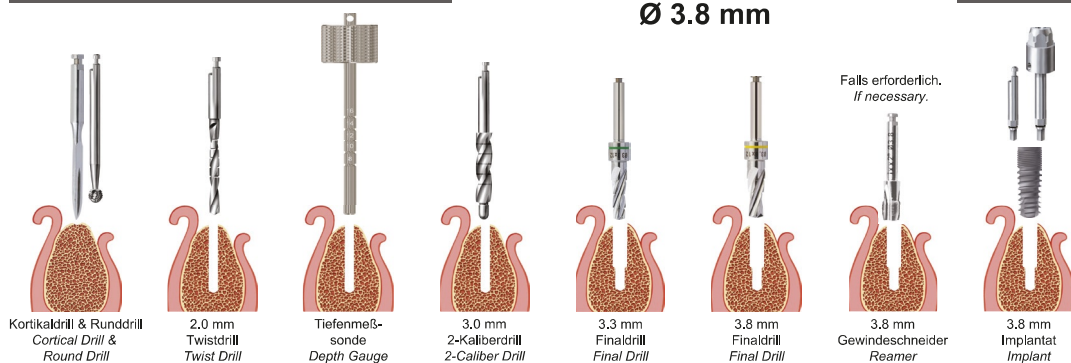

Für Implantat / For Implant Ø 4.4 mm

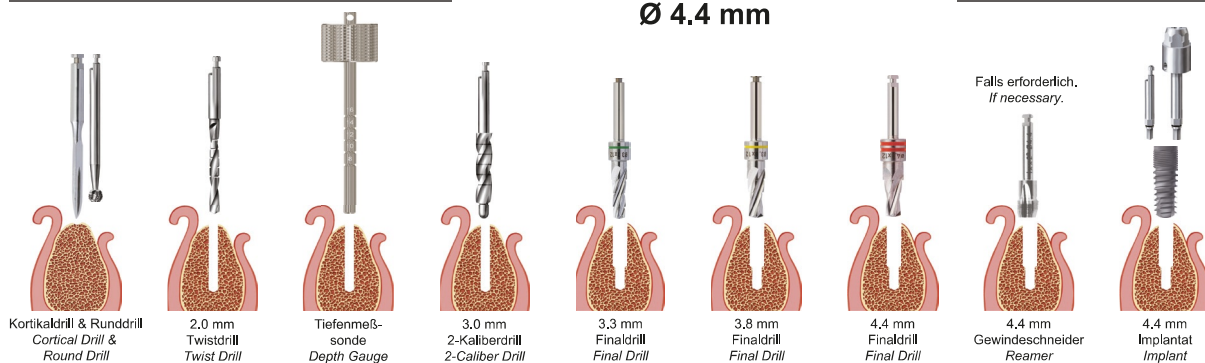

Für Implantat / For Implant Ø 5.0 mm

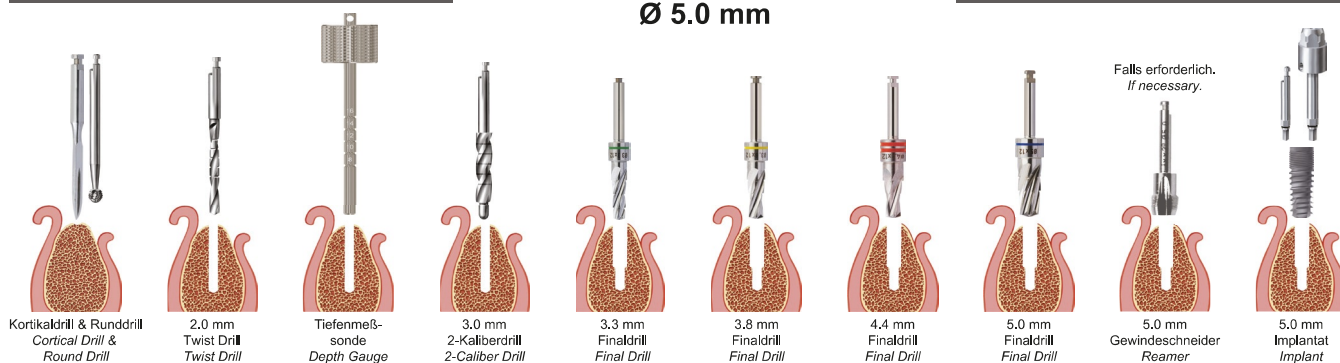



PROTHETIK **PROSTHETICS**

Gingivaformer und Abdruckhilfsteile / *Gingiva Shapers and Impression Parts*

Gingivaformer *Gingiva Shapers*



- Material: Titan Grad 4
- Material: Titanium Grade 4

Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height 2 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 4 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 6 mm
3.3 mm	1203321tra	1203341tra	1203361tra
3.8 mm	1203821tra	1203841tra	1203861tra
4.4 mm	1204421tra	1204441tra	1204461tra
5.0 mm	1205021tra	1205041tra	1205061tra

Abdruckpfosten für geschlossene Abformung *Impression Posts for Closed Tray Impression*



- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Zentralschraube und Abformkappe.
- Material: Titanium Grade 5
- Including central screw and impression cap.


Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	860133tra
3.8 mm	860138tra
4.4 mm	860144tra
5.0 mm	860150tra



Abformkappe für geschlossene Abformung
Cap for Closed Tray Impression


- Artikel-Nr: 8600001tra
- Material: POM
- Item No: 8600001tra
- Material: POM

Abdruckpfosten für offene Abformung *Impression Posts for Open Tray Impression*

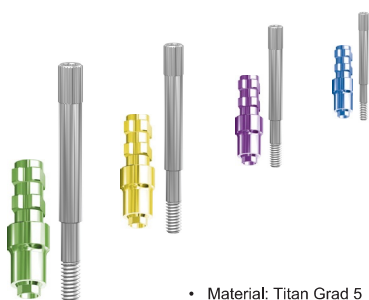

- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Abformschraube.
- Material: Titanium Grade 5
- Including impression screw.

Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	860033tra
3.8 mm	860038tra
4.4 mm	860044tra
5.0 mm	860050tra

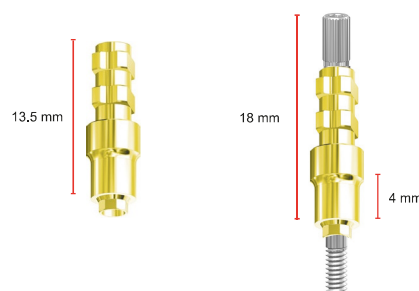

Modellanaloge *Model Analogs*




- Material: Titan Grad 5
- Material: Titanium Grade 5

Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	9200331tra
3.8 mm	9200381tra
4.4 mm	9200441tra
5.0 mm	9200501tra




Beispiel: Ø 3.8 mm
Example: Ø 3.8 mm

Geschlossene Abformung Closed Tray Impression

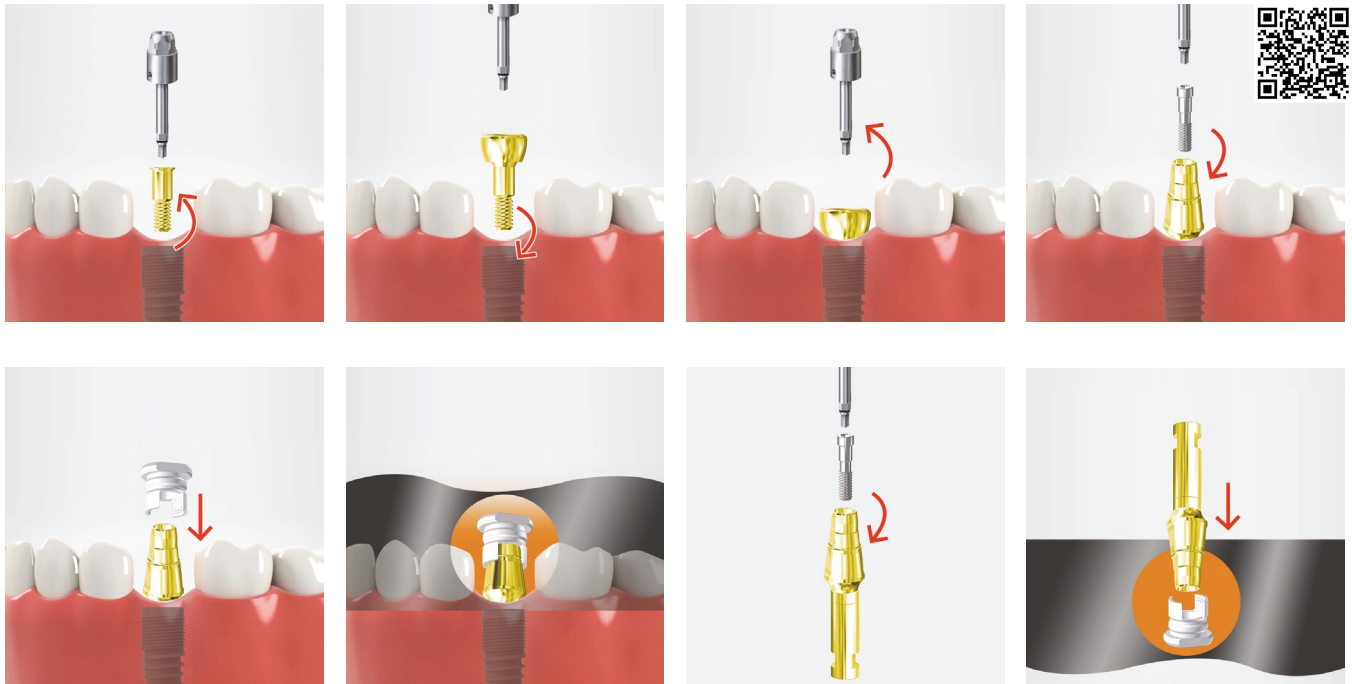

Beispiel: Ø 3.8 mm
Example: Ø 3.8 mm

Offene Abformung Open Tray Impression

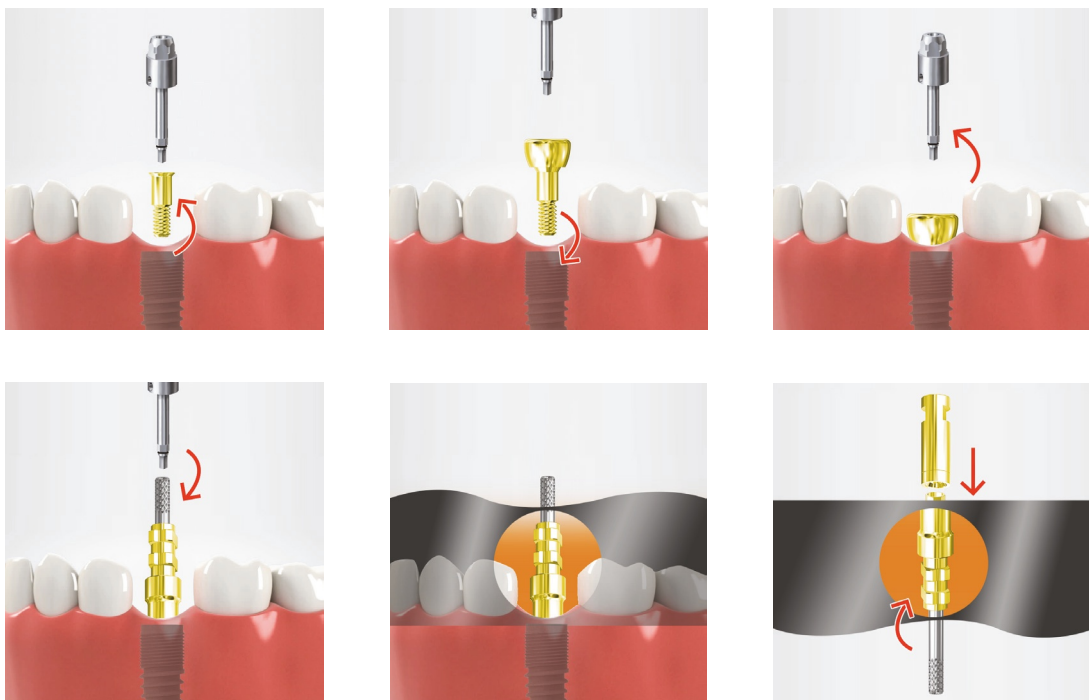

3.3 mm



3.8 mm




4.4 mm



5.0 mm


Titanpfosten *Narrow Abutments*

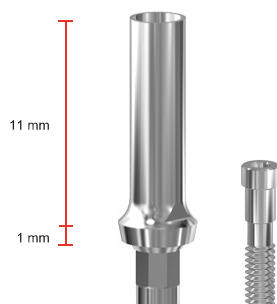

Durchmesser <i>Diameter</i>	Artikel-Nr <i>Item No</i>
3.3 mm	800133tra
3.8 mm	800138tra
4.4 mm	800144tra
5.0 mm	800150tra

- Für zementierte Einzelzahn- und Brückenversorgungen speziell bei begrenzten interdentalen Platzverhältnissen.
- Durchtrittsprofil gerade ausgeformt.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Zentralschraube.
- *For cemented single-tooth and bridge restorations especially with narrow interdental space.*
- *Straight emergence profile.*
- *Material: Titanium Grade 5*
- *Including central screw.*

Standardaufbauten 0° *Standard Abutments 0°*

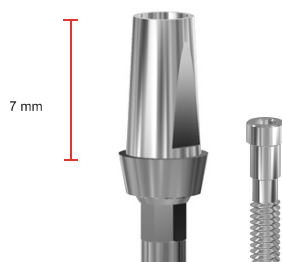

Durchmesser <i>Diameter</i>	Gingivahöhe <i>Gingiva Height</i> 1 mm	Gingivahöhe <i>Gingiva Height</i> 2 mm	Gingivahöhe <i>Gingiva Height</i> 3 mm
3.3 mm	820331tra	820332tra	820333tra
3.8 mm	820381tra	820382tra	820383tra
4.4 mm	820441tra	820442tra	820443tra
5.0 mm	820501tra	820502tra	820503tra


- Für zementierte Einzelzahn- und Brückenversorgungen.
- Durchtrittsprofil gerade ausgeformt.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Zentralschraube.
- *For cemented single-tooth and bridge restorations.*
- *Straight emergence profile.*
- *Material: Titanium Grade 5*
- *Including central screw.*

Anatomische Abutments 0° Anatomic Abutments 0°



Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva height 1 mm	Gingivahöhe Gingiva height 2 mm	Gingivahöhe Gingiva height 3 mm
3.3 mm	810331tra	810332tra	810333tra
3.8 mm	810381tra	810382tra	810383tra
4.4 mm	810441tra	810442tra	810443tra
5.0 mm	810501tra	810502tra	810503tra

- Für zementierte Einzelzahn- und Brückenversorgungen.
 - Durchtrittsprofil anatomisch ausgeformt.
 - Material: Titan Grad 5
 - Inklusive Zentralschraube.
- For cemented single-tooth and bridge restorations.
 - Anatomic emergence profile.
 - Material: Titanium Grade 5
 - Including central screw.

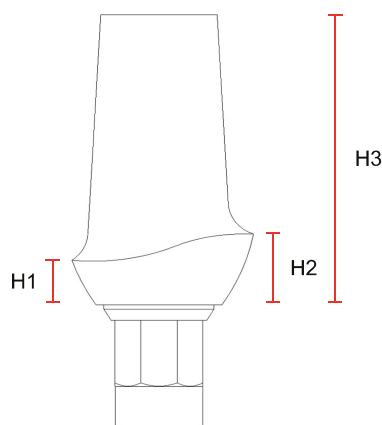

Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva height	H1	H2	H3
3.3 mm	1 mm	0.5 mm	1 mm	7.5 mm
3.8 mm	2 mm	1.5 mm	2 mm	8.5 mm
4.4 mm	3 mm	2.5 mm	3 mm	9.5 mm
5.0 mm				


Anatomische Abutments 15° *Anatomic Abutments 15°*



Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height 1 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 2 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 3 mm
3,3 mm	811331tra	811332tra	811333tra
3,8 mm	811381tra	811382tra	811383tra
4,4 mm	811441tra	811442tra	811443tra
5,0 mm	811501tra	811502tra	811503tra

- Für zementierte Einzelzahn- und Brückenversorgungen.
- Durchtrittsprofil anatomisch ausgeformt.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Zentralschraube.

- *For cemented single-tooth and bridge restorations.*
- *Anatomic emergence profile.*
- *Material: Titanium Grade 5*
- *Including central screw.*

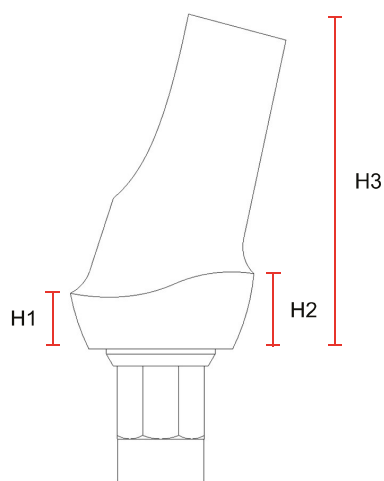

Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height	H1	H2	H3
3,3 mm	1 mm	0,5 mm	1 mm	8 mm
3,8 mm	2 mm	1,5 mm	2 mm	9 mm
4,4 mm	3 mm	2,5 mm	3 mm	10 mm
5,0 mm				


Anatomische Abutments 25° Anatomic Abutments 25°



Durchmesser Diameter	Gingivahöhe gingiva height 0.5 mm	Gingivahöhe gingiva height 2.0 mm
3.3 mm	8123305tra	812332tra
3.8 mm	8123805tra	812382tra
4.4 mm	8124405tra	812442tra
5.0 mm	8125005tra	812502tra


- Für zementierte Einzelzahn- und Brückenversorgungen.
- Durchtrittsprofil anatomisch ausgeformt.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Zentralschraube.

- For cemented single-tooth and bridge restorations.
- Anatomic emergence profile.
- Material: Titanium Grade 5
- Including central screw.

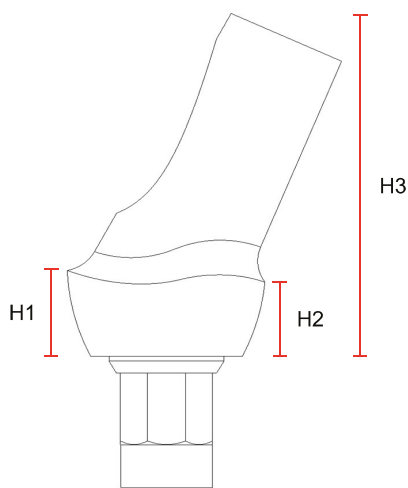

Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height	H1	H2	H3
3.3 mm 3.8 mm	0.5 mm	1.0 mm	0.5 mm	8 mm
4.4 mm 5.0 mm	2.0 mm	2.3 mm	2.0 mm	9 mm


Gießbare Kunststoff-Aufbauten (mit Achtkant) *Castable Plastic Abutments (with Octagon)*

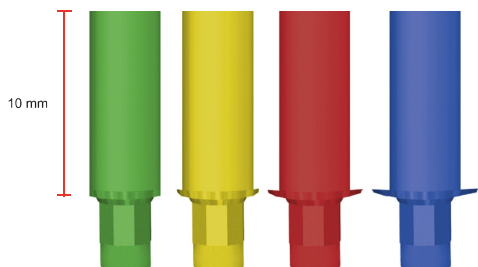

Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	8302331tra
3.8 mm	8302381tra
4.4 mm	8302441tra
5.0 mm	8302501tra

- Für konventionell gefertigte Kronen und Brücken.
 - Mit Rotationssicherung.
 - Material: POM
 - Zentralschraube muss separat bestellt werden.
-
- *For conventionally fabricated crowns and bridges.*
 - *With rotation protection.*
 - *Material: POM*
 - *Central screw has to be ordered separately.*


Gießbare Kunststoff-Aufbauten (ohne Achtkant) *Castable Plastic Abutments (no Octagon)*

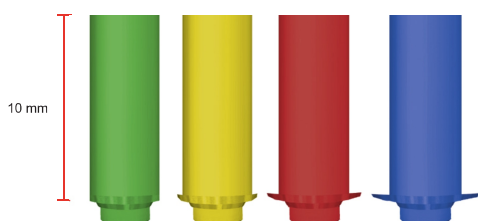

Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	8303331tra
3.8 mm	8303381tra
4.4 mm	8303441tra
5.0 mm	8303501tra


- Für konventionell gefertigte Brücken.
 - Ohne Rotationssicherung.
 - Material: POM
 - Zentralschraube muss separat bestellt werden.
-
- *For conventionally fabricated bridges.*
 - *Without rotation protection.*
 - *Material: POM*
 - *Central screw has to be ordered separately.*

Schrauben für Aufbauten *Abutment screws*

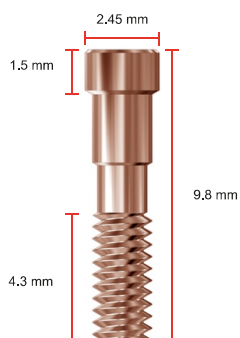

Labor-Zentralschraube
Laboratory Central Screw

- Artikel-Nr: 2600051tra
- Material: Titan Grad 5
- Item No: 2600051tra
- Material: Titanium Grade 5

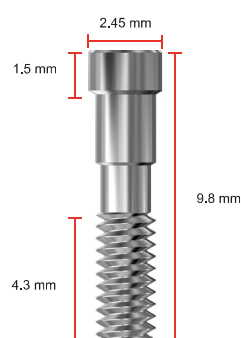

Zentralschraube
Central Screw

- Artikel-Nr: 2600001tra
- Material: Titan Grad 5
- Item No: 2600001tra
- Material: Titanium Grade 5

Scanbody Scanbody




Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	8300301tra*
3.8 mm	
4.4 mm	
5.0 mm	

- Für die digitale Abformung (Scannen).
- Matte Oberfläche, kein Scanspray erforderlich.
- Universell für alle Durchmesser geeignet.
- Material: Titan Grad 4
- Zentralschraube muss separat bestellt werden.

- *For digital impression taking (scanning).*
- *Matt surface, no scanning spray required.*
- *Universally suitable for all diameters.*
- *Material: Titanium Grade 4*
- *Central screw has to be ordered separately.*

Titanklebebasen Ti-Bases

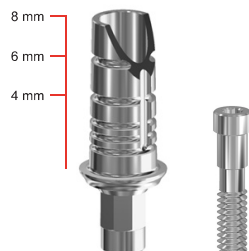


Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	830033tra*
3.8 mm	830038tra*
4.4 mm	830044tra*

- Für zementierte und adhäsiv befestigte Einzelzahn- und Brückenversorgungen aus Keramik und Zirkondioxid.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Zentralschraube.

- *For cemented and adhesively fixed single-tooth and bridge restorations made of ceramics and zirconium dioxide.*
- *Material: Titanium Grade 5*
- *Including central screw.*

CRC Aufbau CRC Abutment

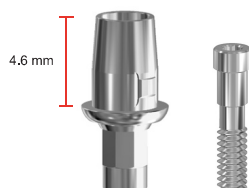

Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.8 mm	830138tm

- Für zementierte und adhäsiv befestigte Einzelzahn- und Brückenversorgungen aus Keramik und Zirkondioxid.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Zentralschraube.

- *For cemented and adhesively fixed single-tooth and bridge restorations made of ceramics and zirconium dioxide.*
- *Material: Titanium Grade 5*
- *Including central screw.*

Digitales Modell analog Digital Model Analog




Durchmesser Diameter	Artikel-Nr Item No
3.3 mm	920000tra*
3.8 mm	
4.4 mm	
5.0 mm	

- Für die digitale Modelherstellung (3D-Druck).
- Universell für alle Durchmesser geeignet.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Befestigungsschraube.

- *For digital model production (3D Printing).*
- *Universally suitable for all diameters.*
- *Material: Titanium Grade 5*
- *Including fixing screw.*

Aufbauten für herausnehmbaren Zahnersatz / Abutments for Removable Dentures

Kugelaufbauten (1.8 mm) Ball Abutments (1.8 mm)

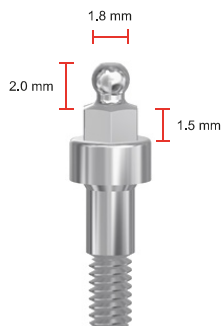

Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height 2 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 3 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 4 mm
3.3 mm	8813321tra	8813331tra	8813341tra
3.8 mm	8813821tra	8813831tra	8813841tra
4.4 mm	8814421tra	8814431tra	8814441tra
5.0 mm	8815021tra	8815031tra	8815041tra

- Für herausnehmbare Deckprothesen.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Connector und Stegschraube.

- For removable overdentures.
- Material: Titanium Grade 5
- Including connector and bar screw.




Prothetik-Set Chairside
Prosthetic Set Chairside

- Artikel-Nr: 241189803
- Item No: 241189803



Prothetik-Set Labor
Prosthetic Set Laboratory

- Artikel-Nr: 241199803
- Item No: 241199803

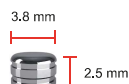

Gehäuse (2er Pack)
Housing (Pack of 2)

- Artikel-Nr: 240022003
- Material: INOX
- Item No: 240022003
- Material: Stainless steel

Platzhalter (10er Pack)
Spacer (Pack of 10)

- Artikel-Nr: 240493803
- Material: EVA
- Item No: 240493803
- Material: EVA

Labormatrizen (6er Pack)
Laboratory Females (Pack of 6)

- Artikel-Nr: 240547503
- Material: PA
- Item No: 240547503
- Material: PA

Standard Retention (1.100 g)
Standard Retention (1.100 g)

- Artikel-Nr: 240327503
- Material: PA
- Item No: 240327503
- Material: PA

Weiche Retention (800 g)
Soft Retention (800 g)

- Artikel-Nr: 240307503
- Material: PA
- Item No: 240307503
- Material: PA


Extra Weiche Retention (450 g)*
Extra Soft Retention (450 g)*

- Artikel-Nr: 240317503
- Material: PA
- Item No: 240317503
- Material: PA

* Artikel ist nicht Bestandteil der Prothetik-Sets.
* Article is not included in the prosthetic sets.

Matrizen (6er Pack) / Females (Pack of 6)

Kugelaufbauten (2.5 mm) Ball Abutments (2.5 mm)

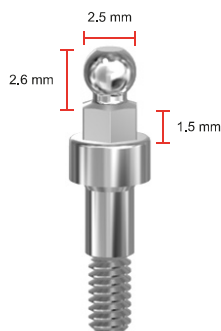

Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height 2 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 3 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 4 mm
3.3 mm	8823321tra	8823331tra	8823341tra
3.8 mm	8823821tra	8823831tra	8823841tra
4.4 mm	8824421tra	8824431tra	8824441tra
5.0 mm	8825021tra	8825031tra	8825041tra

- Für herausnehmbare Deckprothesen.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Connector und Stegschraube.

- For removable overdentures.
- Material: Titanium Grade 5
- Including connector and bar screw.




Prothetik-Set Chairside
Prosthetic Set Chairside

- Artikel-Nr: 241179803
- Item No: 241179803



Prothetik-Set Labor
Prosthetic Set Laboratory

- Artikel-Nr: 241209803
- Item No: 241209803

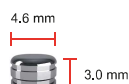

Gehäuse (2er Pack)
Housing (Pack of 2)

- Artikel-Nr: 240012003
- Material: INOX
- Item No: 240012003
- Material: Stainless steel

Platzhalter (10er Pack)
Spacer (Pack of 10)

- Artikel-Nr: 240493803
- Material: EVA
- Item No: 240493803
- Material: EVA

Labormatrizen (6er Pack)
Laboratory Females (Pack of 6)

- Artikel-Nr: 240537503
- Material: PA
- Item No: 240537503
- Material: PA

Standard Retention (1.100 g)
Standard Retention (1.100 g)

- Artikel-Nr: 240287503
- Material: PA
- Item No: 240287503
- Material: PA

Weiche Retention (800 g)
Soft Retention (800 g)

- Artikel-Nr: 240267503
- Material: PA
- Item No: 240267503
- Material: PA

Extra Weiche Retention (450 g)*
Extra Soft Retention (450 g)*

- Artikel-Nr: 240277503
- Material: PA
- Item No: 240277503
- Material: PA

* Artikel ist nicht Bestandteil der Prothetik-Sets.
* Article is not included in the prosthetic sets.

Stegpfosten *Bar Abutments*



- Für herausnehmbare Deckprothesen.
- Material: Titan Grad 5
- Inklusive Connector und Stegschraube.

- For removable overdentures.
- Material: Titanium Grade 5
- Including connector and bar screw.

Durchmesser Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height 2 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 3 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 4 mm
3.3 mm	850332tra	850333tra	850334tra
3.8 mm	850382tra	850383tra	850384tra
4.4 mm	850442tra	850443tra	850444tra
5.0 mm	850502tra	850503tra	850504tra



- Connector für 2 mm-
Stegpfosten (orange)**
**Connector for 2 mm
Bar Abutments (orange)**
- Artikel-Nr: 8550021tra
 - Material: POM
 - Item No: 8550021tra
 - Material: POM




- Connector für 3 mm-
Stegpfosten (weiß)**
**Connector for 3 mm
Bar Abutments (white)**
- Artikel-Nr: 8550031tra
 - Material: POM
 - Item No: 8550031tra
 - Material: POM



- Connector für 4 mm-
Stegpfosten (grau)**
**Connector for 4 mm
Bar Abutments (grey)**
- Artikel-Nr: 8550041tra
 - Material: POM
 - Item No: 8550041tra
 - Material: POM



- Stegschraube
Bar Screw**
- Artikel-Nr: 2601001tra
 - Material: Titan Grad 5
 - Material: Titanium Grade 5
 - Item-No: 2601001tra

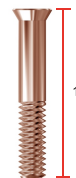

- Labor-Stegschraube
Laboratory Bar Screw**
- Artikel-Nr: 2601051tra
 - Material: Titan Grad 5
 - Material: Titanium Grade 5
 - Item-No: 2601051tra


Weitere Stegkomponenten *Other Bar Components*



- Tropfensteg (6er Pack)**
Drop Shaped Bar (Pack of 6)
- Länge: 50 mm
 - Artikel-Nr: 69973
 - Material: POM
 - Length: 50 mm
 - Item No: 69973
 - Material: POM




- Rundsteg (6er Pack)**
Round Bar (Pack of 6)
- Länge: 50 mm
 - Artikel-Nr: 69974
 - Material: POM
 - Length: 50 mm
 - Item No: 69974
 - Material: POM

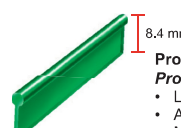

- Profilsteg (6er Pack)**
Profiled Bar (Pack of 6)
- Länge: 50 mm
 - Artikel-Nr: 69972
 - Material: POM
 - Length: 50 mm
 - Item No: 69972
 - Material: POM




- Eindrückstift
Insertion Tool**
- Artikel-Nr: 69978
 - Material: PP
 - Item No: 69978
 - Material: PP

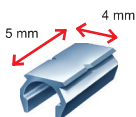

- Außenhülse (4er Pack)**
Housing (Pack of 4)
- Artikel-Nr: 863731
 - Material: INOX
 - Item No: 863731
 - Material: Stainless steel

- Artikel-Nr: 863731T
- Material: Titan Grad 5
- Item No: 863731T
- Material: Titanium Grade 5

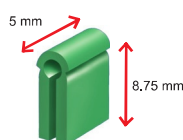

- Platzhalter (6er Pack)**
Spacer (Pack of 6)
- Artikel-Nr: 69976
 - Material: PP
 - Item No: 69976
 - Material: PP



- Weiß / White**
**Innen Ø / Internal Ø
1.4 mm**
- Artikel-Nr: 86376
 - Material: PP
 - Item No: 86376
 - Material: PP



- Rot / Red**
**Innen Ø / Internal Ø
1.5 mm**
- Artikel-Nr: 86375
 - Material: PP
 - Item No: 86375
 - Material: PP



- Schwarz / Black**
**Innen Ø / Internal Ø
1.6 mm**
- Artikel-Nr: 86374
 - Material: PP
 - Item No: 86374
 - Material: PP




- Gelb / Yellow**
**Innen Ø / Internal Ø
1.8 mm**
- Artikel-Nr: 86378
 - Material: PP
 - Item No: 86378
 - Material: PP



- Orange / Orange**
**Innen Ø / Internal Ø
1.9 mm**
- Artikel-Nr: 69975
 - Material: PP
 - Item No: 69975
 - Material: PP

Aufbauten für herausnehmbaren Zahnersatz / Abutments for Removable Dentures

OT Equator® OT Equator®

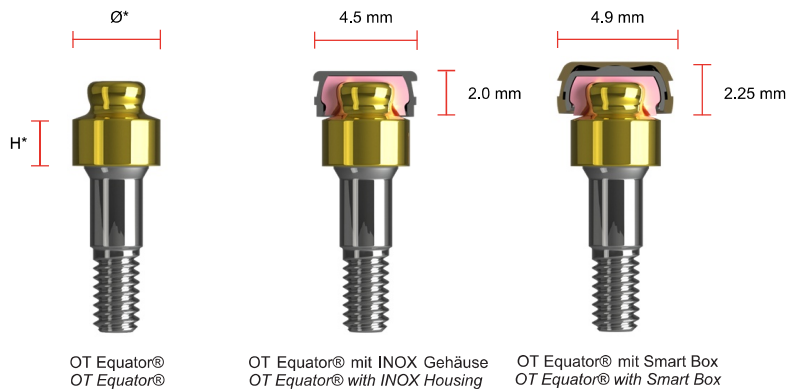


- Für implantatgetragene Deckprothesen.
 - Ausgleich von Implantatdivergenzen von bis zu 50° möglich.
 - TIN-Beschichtung für bessere Verschleißigenschaften.
 - Auch für CAD/CAM-Stege erhältlich.
 - Material: Titan Grad 5
- For implant-supported overdentures.
 - Compensation of implant divergences of up to 50° possible.
 - TIN coating for improved wear properties.
 - Also available for CAD/CAM bars.
 - Material: Titanium Grade 5

Durchmesser b Diameter	Gingivahöhe Gingiva Height 0,5 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 1 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 2 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 3 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 4 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 5 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 6 mm	Gingivahöhe Gingiva Height 7 mm
3.3 mm	030SD3305	030SD331	030SD332	030SD333	030SD334	030SD335	030SD336	030SD337
3.8 mm	030SD3805	030SD381	030SD382	030SD383	030SD384	030SD385	030SD386	030SD387
4.4 mm	030SD4405	030SD441	030SD442	030SD443	030SD444	030SD445	030SD446	030SD447
5.0 mm	030SD5005	030SD501	030SD502	030SD503	030SD504	030SD505	030SD506	030SD507

* Durchmesser und Gingivahöhe gemäß Tabelle. / * Diameter and gingiva height according to table.



Prothetik-Set (Standard)
Prosthetic Set (Standard)
Artikel-Nr / Item No: 192ECE
Divergenzausgleich bis max. 30°
Divergence compensation up to max. 30°

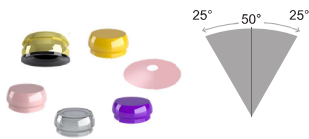

Prothetik-Set (Smart Box)
Prosthetic Set (Smart Box)
Artikel-Nr / Item No: 335SBC
Divergenzausgleich bis max. 50°
Divergence compensation up to max. 50°



Modellanalog (2er Pack)
Model Analog (Pack of 2)
Artikel-Nr / Item No: 144AE



Abdruckkappe (2er Pack)
Impression Cap (Pack of 2)
Artikel-Nr / Item No: 044CAIN



Stark (2.700 g)
Strong (2.700g)
• Artikel-Nr: 140CEV
• Material: POM
• Item No: 140CEV
• Material: POM



Matrizen (4er Pack) / Females (Pack of 4)
Standard (1.800 g)
Standard (1.800g)
• Artikel-Nr: 140CET
• Material: PA
• Item No: 140CET
• Material: PA



Soft (1.200 g)
Soft (1.200g)
• Artikel-Nr: 140CER
• Material: PA
• Item No: 140CER
• Material: PA



Extra Soft (600 g)
Extra Soft (600g)
• Artikel-Nr: 140CEG
• Material: PE
• Item No: 140CEG
• Material: PE



Labormatrizen (4er Pack)
Laboratory Females (Pack of 4)
• Artikel-Nr: 140CEN
• Material: PA
• Item No: 140CEN
• Material: PA



Gehäuse (2er Pack)
Housing (Pack of 2)
• Artikel-Nr: 141CAE
• Material: INOX
• Item No: 141CAE
• Material: Stainless steel



Smart Box inkl. Labormatrize
Smart Box incl. Laboratory Female
• Artikel-Nr: 330SBE
• Material: Titan
• Item No: 330SBE
• Material: Titanium

OT Equator® für Konstruktionen OT Equator® for constructions

Gusstechnik Casting Technique



Set Set
Artikel-Nr / Item No: 092ECQ

**Patrize Kunststoff
Male Plastic**
Artikel-Nr / Item No: 151SS

Direktverschraubung Direct screwing



OT Equator® (Gewinde Ø 2.0 mm)
OT Equator® (Thread Ø 2.0 mm)
Artikel-Nr / Item No: 039SFE2**



OT Equator® Set (Gewinde Ø 1.6 mm)
OT Equator® Set (Thread Ø 1.6 mm)
Artikel-Nr / Item No: 160EQB

Klebetechnik Gluing Technique



OT Equator® (Gewinde Ø 1.6 mm)
OT Equator® (Thread Ø 1.6 mm)
Artikel-Nr / Item No: 339SFE




Gewindehülse (Gewinde Ø 1.6 mm)
Threaded sleeve (Thread Ø 1.6 mm)
Artikel-Nr / Item No: 239GSF




**Platzhalter
Spacer**
Artikel-Nr / Item No: 339SSE

Implantate und Aufbauten Implants and Abutments

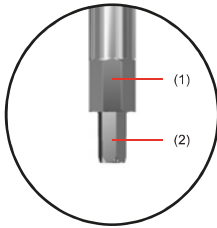


(1) Achtkant (2.30 mm) zum Inserieren der Implantate.
(1) Octagon (2.30 mm) for inserting the implants.

(2) Sechskant (1.25 mm) zum Eindrehen der Aufbauschrauben.
(2) Hexagon (1.25 mm) for screwing in the abutment screws.

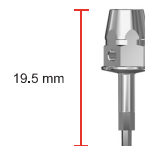


Universaleindrehhilfe (molar)
Universal Insertion Tool (molar)
(für Drehmomentratsche / for torque ratchet)
Artikel-Nr / Item No: 142331tra

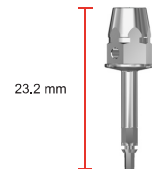


Universaleindrehhilfe (kurz)*
Universal Insertion Tool (short)*
(für Drehmomentratsche / for torque ratchet)
Artikel-Nr / Item No: 140331tra



Drillhandstück
Tool for Manual Use
(Adapter für Drehmomentratsche / Adapter for torque ratchet)
Artikel-Nr / Item No: 140300tra

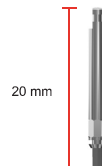

Maschinelle Eindrehhilfe*
Insertion Tool for Contra-Angle*
(für Winkelstück / for contra-angle)
Artikel-Nr / Item No: 1406001tra

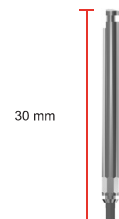

Maschinelle Eindrehhilfe*
Insertion Tool for Contra-Angle*
(für Winkelstück / for contra-angle)
Artikel-Nr / Item No: 1406301tra

* O-Ring erforderlich, separat erhältlich. / O-ring required, available separately.

O-Ring (10er Pack)

O-Ring (Pack of 10)

Artikel-Nr / Item No: 140650



Drehmomentratsche
Torque Ratchet
(für manuelle Werkzeuge / for manual tools)
Artikel-Nr / Item No: 505-1000202-F



Haltegriff
Holder
(für Aufbauten / for abutments)
Artikel-Nr / Item No: 1404001tra

Kugelaufbauten Ball Abutments



Drillhandstück
Tool for Manual Use
(zur Verwendung mit Drehmomentratsche / For use with torque ratchet)
Artikel-Nr / Item No: 140300tra



Universalinstrument
Universal Tool
(zum Einsetzen/Entfernen von Matrizen / for insertion/removal of females)
Artikel-Nr / Item No: 4851C

OT-Equator® OT-Equator®



Universaleindrehhilfe (kurz)
Universal Insertion Tool (short)
(zur Verwendung mit Drehmomentratsche / for use with torque ratchet)
Artikel-Nr / Item No: 140331tra



Maschinelle Eindrehhilfe
Insertion Tool for Contra-Angle
(zur Verwendung mit Winkelstück / for use with contra-angle)
Artikel-Nr / Item No: 1406001tra



Universalinstrument
Universal Tool
(zum Einsetzen/Entfernen von Matrizen / for insertion/removal of females)
Artikel-Nr / Item No: 4851C



Vertriebspartner für Deutschland / Distributor for Germany

SHARED  **IMPLANTOLOGY**

Shared Implantology GmbH
Breite Strasse 3b, 38838 Schlanstedt, Germany

Fon +49 (0) 39 401 / 53 00 00
www.shared-implantology.gmbh

Fax +49 (0) 39 401 / 16 49 99
info@shared-implantology.gmbh



<https://shared-implantology.gmbh>