

SimplySilk® Membrane

Firma Bioceramed, Portugal

SimplySilk® ist eine resorbierbare Membran für die gesteuerte Geweberegeneration. Sie bietet hohe Biokompatibilität, maßgeschneiderte mechanische Eigenschaften und Durchlässigkeit zur Unterstützung der Zellmigration und optimalen Heilung.

Die magnesiumverstärkte Version verbessert Stabilität, Platzerhalt und Knochenregeneration und bietet so eine verbesserte Leistung in komplexen Fällen.

SimplySilk® Membranen sind resorbierbare Implantate aus gereinigtem medizinischem Seidenfibroin. Seidenfibroin ist ein Protein, das in einem biotechnologischen Verfahren aus den Seidenkokons des heimischen Seidenspinners (*Bombyx mori*) gewonnen wird.

Neben Seidenfibroin verfügt die SimplySilk® Barrier Plus Triangle Magnesium Membran über einen verstärkten Magnesiumrahmen:

Die Formanpassungsfähigkeit wird deutlich verbessert.

Die Form lässt sich leicht an die Kontur des Gewebedefekts anpassen.


SimplySilk® Mg ist vollständig bioresorbierbar.

Patenterte Magnesiumtechnologie

Die Oberfläche des Magnesiumrahmens besteht aus einer Oxidkeramik namens Kermasorb®.

Kermasorb® ist ideal für seine biologisch abbaubare Oberfläche. Die funktionellen Eigenschaften der Schicht können den Abbauprozess verzögern und so den Prozess in den ersten Wochen nach der Implantation verlangsamen.

Die vollständige Resorption des Implantats macht eine operative Entfernung überflüssig.

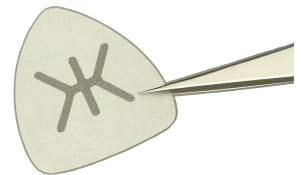

Bezeichnung	Artikel-nummer	Beschreibung/Abpackung	Preis Netto
SimplySilk® Membrane	342046	Barrier Plus Triangle S 24 x 24 mm - 1 Unit	109,00
SimplySilk® Membrane	342058	Barrier Plus Triangle M 30 x 30 mm - 1 Unit	129,00
SimplySilk® Membrane	342064	Barrier Plus Triangle G 35 x 35 mm - 1 Unit	149,00
SimplySilk® Membrane	342048	Barrier Plus Triangle Magnesium S 24 x 24 mm - 1 Unit	179,00
SimplySilk® Membrane	342060	Barrier Plus Triangle Magnesium M 30 x 30 mm - 1 Unit	199,00

Preisangaben unverbindlich, netto!
Aktuelle Preise, Lieferzeiten und
evtl. weitere Auswahl auf Anfrage.

Tel: 039401-530000
info@shared-implantology.gmbh

SHARED  IMPLANTOLOGY